

Guia de Referência Rápida do adaptador PrecisionPoint não-estéril reutilizável para EV29L

1. (antes do primeiro uso e de cada uso)

a. Limpeza com Cidezyme, 5 minutos

- Use uma escova apropriada para canais e cânulas
- Lave todos os canais e cânulas com a solução de limpeza
- Depois de limpar, enxagúe por 5 minutos.

b. Esterilização


• Esterilização: Autoclave classe B

- 134°C (273°F) por 3 min
- 132°C (270°F) por 4 min

c. Inspeção após reprocessar (sem rachaduras visíveis, descoloração ou outros danos)

2. Instalação no transdutor EV29L


Instale o adaptador de plástico no topo da bainha. Instale os braços da guia PrecisionPoint nos lados do adaptador. A guia PrecisionPoint é de uso único e deve ser utilizada de acordo com as instruções do fabricante.

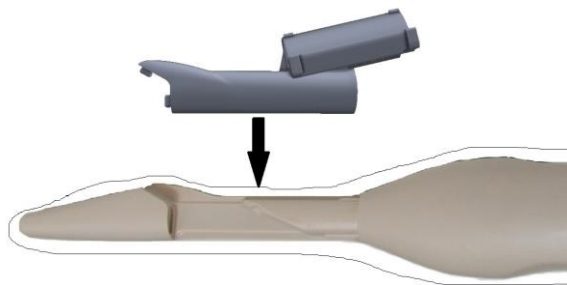

2a



2b

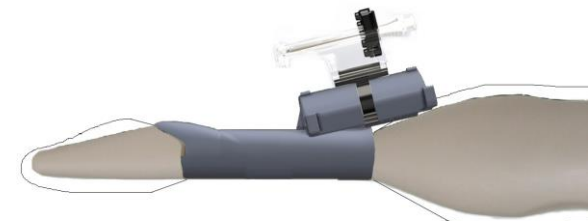

2c

3. Vida útil

O guia PrecisionPoint não-estéril reutilizável para EV29L é projetado para durar 3 meses ou 75 ciclos de reprocessamento (o que vier primeiro) quando usado com os devidos cuidados.

Para obter instruções mais detalhadas, consulte os seguintes manuais:

Etapa	Manual	Seção do manual
1. Reprocessamento (antes do primeiro uso e de cada uso)	Guia de Cuidados, Limpeza e Uso do EV29L	Capítulo 4: Reprocessamento Seções 3.2, 3.3 e 3.5: Reprocessamento de guias de agulha reutilizáveis e outros acessórios* * As instruções de limpeza, esterilização e inspeção também se aplicam ao adaptador PrecisionPoint reutilizável para EV29L.
2. Instalação no transdutor EV29L	Guia de Cuidados, Limpeza e Uso do EV29L	Capítulo 3: Preparação para aquisição de imagem Seção 2.1.1: Instalação do guia de agulha* * Estas instruções também se aplicam ao adaptador PrecisionPoint reutilizável para EV29L.

Se precisar de **assistência técnica** para o microultrassonógrafo ExactVu™ ou para o adaptador PrecisionPoint reutilizável para EV29L, entre em contato com o Suporte Técnico da Exact Imaging. As informações de contato para a sua região estão disponíveis na página <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands (Países Baixos)



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland (Suíça)

Responsável no Reino Unido
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ United Kingdom (Reino Unido)



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgium (Bélgica)

Numeração no catálogo da Exact Imaging

- EV-29L: Transdutor EV29L
- EV-BIOGR-PP: Adaptador PrecisionPoint reutilizável para EV29L
- EV-SYS-220: Sistema de microultrassonografia ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120: Sistema de microultrassonografia ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Sistema de microultrassonografia ExactVu™ (100V)