

Οδηγός γρήγορης αναφοράς για τον μη αποστειρωμένο προσαρμογέα PrecisionPoint πολλαπλών χρήσεων EV29L

1. Επανεπεξεργασία πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση

a. Καθαρισμός με Cidezyme, 5 λεπτά

- Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη βούρτσα για τα κανάλια / τις κάνουλες
- Ξεπλύνετε όλα τα κανάλια / τις κάνουλες με καθαριστικό
- Ξεπλύνετε για 5 λεπτά μετά τον καθαρισμό.


b. Αποστείρωση

- Αποστείρωση: Αυτόκαυστο Κλάσης Β
 - 134 °C (273 °F) για 3 λεπτά
 - 132 °C (270 °F) για 4 λεπτά

c. Επιθεώρηση μετά την επανεπεξεργασία (απουσία ορατών ρωγμών, αποχρωματισμού ή φθοράς)

2. Προσάρτηση στον ηχοβολέα EV29L


Τοποθετήστε τον πλαστικό προσαρμογέα επάνω από το θηκάρι. Συνδέστε καθένα βραχίονα του οδηγού PrecisionPoint στις πλαϊνές πλευρές του προσαρμογέα. Ο οδηγός PrecisionPoint είναι μίας χρήσης και πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

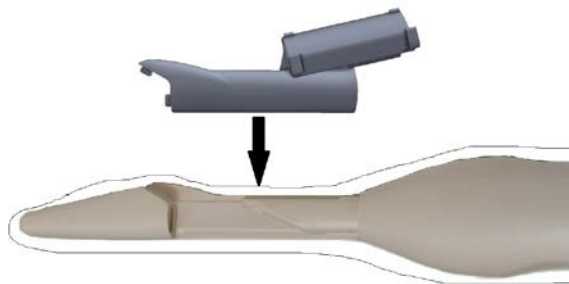

2a



2β

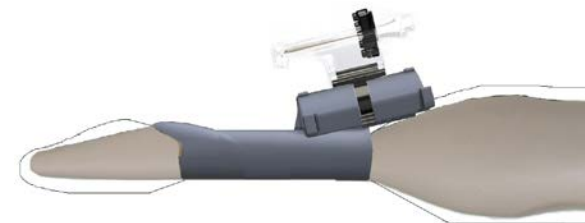

2γ

3. Διάρκεια ζωής

Όταν χρησιμοποιείται με την ενδεδειγμένη φροντίδα, ο μη αποστειρωμένος προσαρμογέας PrecisionPoint πολλαπλών χρήσεων EV29L έχει σχεδιαστεί με διάρκεια ζωής 3 μηνών ή 75 κύκλων επανεπεξεργασίας, όποιο παρέλθει πρώτο.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα εγχειρίδια για λεπτομερείς οδηγίες:

Βήμα	Εγχειρίδιο	Ενότητα εγχειριδίου
1. Επανεπεξεργασία (πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση)	Οδηγίες φροντίδας, καθαρισμού και χρήσης για τον EV29L	Κεφάλαιο 4: Επανεπεξεργασία Ενότητες 3.2, 3.3 και 3.5: Επανεπεξεργασία οδηγών βελόνας και παρελκομένων πολλαπλών χρήσεων* * Οι οδηγίες για τον καθαρισμό, την αποστείρωση και την επιθεώρηση ισχύουν επίσης για τον προσαρμογέα PrecisionPoint πολλαπλών χρήσεων EV29L.
2. Προσάρτηση στον ηχοβολέα EV29L	Οδηγίες φροντίδας, καθαρισμού και χρήσης για τον EV29L	Κεφάλαιο 3: Προετοιμασία για απεικόνιση Ενότητα 2.1.1: Προσάρτηση του οδηγού βελόνας* * Οι οδηγίες αυτές ισχύουν επίσης για τον προσαρμογέα PrecisionPoint πολλαπλών χρήσεων EV29L.

Εάν χρειαστείτε **τεχνική βοήθεια** με το σύστημα μικρο-υπερήχων ExactVu™ ή με τον προσαρμογέα PrecisionPoint πολλαπλών χρήσεων EV29L, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Exact Imaging. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://www.exactimaging.com/contact-us> για τα στοιχεία επικοινωνίας στην περιοχή σας.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Καναδάς
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Ολλανδία



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Ελβετία

Υπεύθυνος για το ΗΒ
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Ηνωμένο Βασίλειο



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Βέλγιο

Αριθμοί καταλόγου της Exact Imaging

- EV-29L: Ηχοβολέας EV29L
- EV-BIOGR-PP: Προσαρμογέας PrecisionPoint πολλαπλών χρήσεων EV29L
- EV-SYS-220: Απεικονιστικό σύστημα μικρο-υπερήχων ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120: Απεικονιστικό σύστημα μικρο-υπερήχων ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Απεικονιστικό σύστημα μικρο-υπερήχων ExactVu™ (100V)