

EV29L 非滅菌再使用可能 PrecisionPoint Adapter クイック・リファレンス・ガイド

1. 初回および毎回使用前の再処理法

a. 洗淨: サイデザイム 5 分間

- チャンネル／カニューレ用の適切なブラシを使用します
- すべてのチャンネル／カニューレを洗淨剤を使って洗います
- 洗淨後は 5 分間すすぎます


b. 滅菌

- 滅菌: クラス B オートクレーブ
 - 134° C (273° F) で 3 分間
 - 132° C (270° F) で 4 分間

c. 再処理後の精査 (目にみえるひび割れ、変色、または損傷が無いこと)

2. EV29L トランスデューサーへの取り付け


シースの上部にプラスチック製のアダプターを取り付けます。PrecisionPoint ガイドの各アームをアダプターの側面に動かします。PrecisionPoint ガイドは一回使用で、製造業者の取扱説明書に従って使用してください。

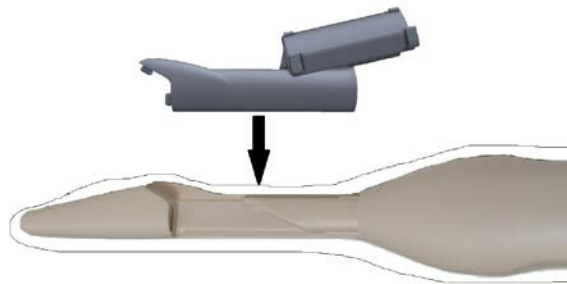

2a



2b

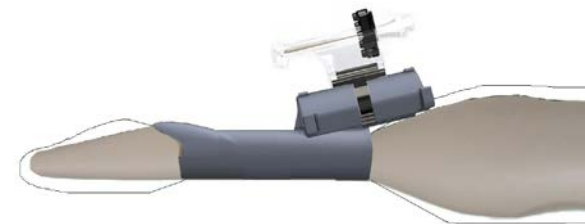

2c

3. 耐用年数

適切に使用する場合、EV29L 非滅菌再使用可能 PrecisionPoint アダプターは、3 か月間、または 75 回のリサイクルのいずれか早い方まで使用可能なように設計されています。

詳細な取扱方法については次のマニュアルを参照してください:

ステップ	マニュアル	マニュアルの項目
1. 再処理 (初回および毎回の使用前)	EV29L の手入れ、洗浄、 使用のガイド	第 4 章:再処理 第 3.2、3.3、3.5 項目:再使用可能なニードルガイドと付属品の再処理* * 洗浄、滅菌、精査方法はまた EV29L 再使用可能 PrecisionPoint アダプターにも適用可能です。
2. EV29L トランスデューサーへの接続	EV29L の手入れ、洗浄、 使用のガイド	第 3 章:画像取得の準備 第 2.1.1 項目:ニードルガイドの取り付け* * これらの方法はまた、EV29L 再使用可能 PrecisionPoint アダプターにも適用可能です。

ExactVu™ マイクロ超音波システム、または EV29L 再使用可能 PrecisionPoint アダプターに技術的援助が必要な場合は、Exact Imaging 技術サポートまでご連絡ください。お客様の地域の連絡先情報については、<https://www.exactimaging.com/contact-us> を参照してください。



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

英国の正規販売代理店
**Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 -
UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ United Kingdom



Exact Imaging BVBA
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgium

Exact Imaging カタログ番号

- EV-29L: EV29L トランスデューサー
- EV-BIOGR-PP: EV29L 再使用可能 PrecisionPoint アダプター
- EV-SYS-220: ExactVu™ マイクロ超音波画像取得システム(220V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ マイクロ超音波画像取得システム(120V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ マイクロ超音波画像取得システム(100V)